




ファストループ リッター ストラップ

- ファストループ リッター ストラップは、リッター(担架)に事前に装着しておいて傷病者の固定を容易に行うために考案されました。
- 傷病者の固定は安全・確実に素早く行う必要があります。一本のウエビングを左右の0リングに交互に通していき、緩みをとって両端をリッターのフレームに固定します。
- ファストループは、半ひねりでループ状に縫製されており、リッターのフレームにガースヒッチ(ひばり結び)で取り付けます。使用しない時も取り付けたままで構いませんが、点検やクリーニングのために取り外すことは容易です。
- 傷病者の大きさにもよりますが、ウエビング(別売)の長さは6mあれば、ほとんどの人に対応することができます。



8本1セット(ブルー×4、レッド×4)

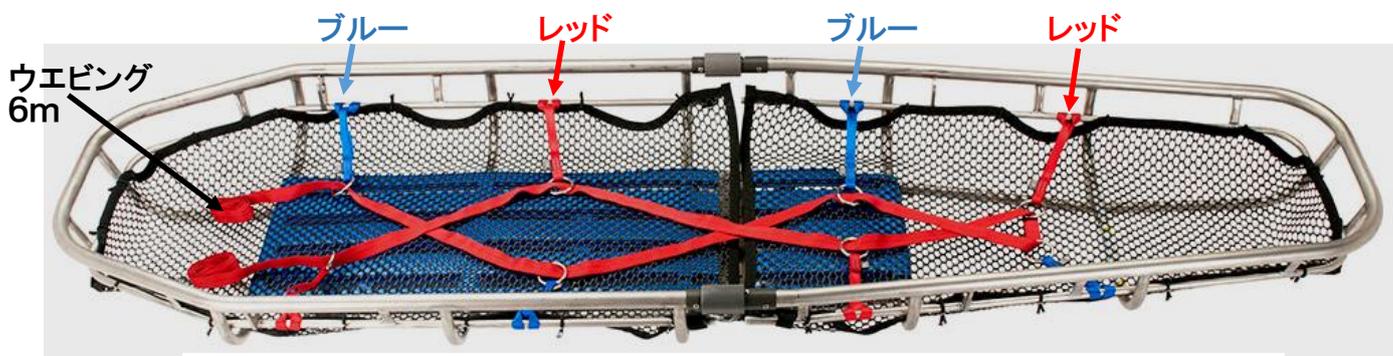

下側のフレームにブルーとレッドのファストループを交互に取り付けておくと、0リングにウエビングを通す際に間違いにくくなります。

ひばり結び



スチール製 0リング 直径5cm



ウエビング

仕 様			
寸法(cm)	破断荷重(kN)	重量(8本)	商品コード
0.8×28	6.67	363g	724159

米国CMCレスキュー社製

輸入元: **FERNO** Japan ファーノ・ジャパン・インク日本支社

総発売元 : 株式会社ジェイ・プランニング
 〒180-0004
 東京都武蔵野市吉祥寺本町 2-26-12
 TEL:0422-20-4488 FAX:0422-20-8440
 URL:http://www.jppla.co.jp

販売店:

※仕様は改良のため予告なく変更される場合があります。 Apr.2015