




# アウトースキッド

## パーティカルストレッチャー用

### 特徴

- パーティカルストレッチャー本体の底部にアウトースキッドを取り付けることにより、傷病者を載せた状態で地上を引きずって移動させることができます。
- 要救助者の重量を地面に預けることで、救助者の負担を大幅に軽減し、救助に必要な人員を少なくすることができます。
- 引きずりを行わない場合でも、底部の保護として有効です。
- 高密度ポリエチレン樹脂製のアウトースキッドは、無毒性で衝撃や摩耗に強く剛性があります。
- アウトースキッドは左右合計4か所に設けられているポートに傷病者固定用ベルトを通すだけで、簡単に素早く取り付けることができます。

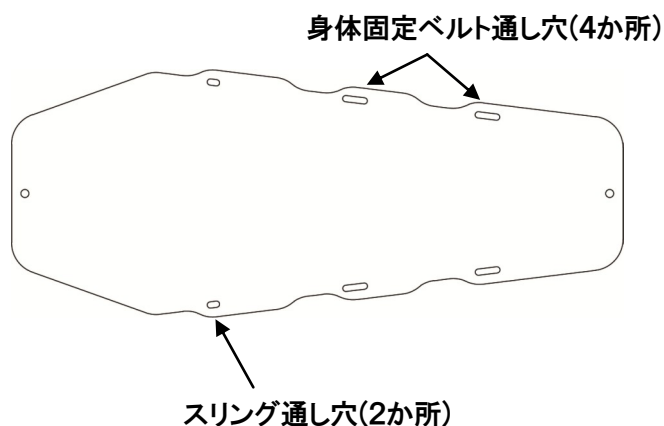

パーティカルストレッチャーに取り付けた状態

### 仕様

- |               |                  |
|---------------|------------------|
| ■ 長さ : 197 cm | ■ 重量 : 1.8 kg    |
| ■ 幅 : 77.5 cm | ■ 材質 : 高密度ポリエチレン |
| ■ 厚さ : 1.5 mm |                  |



パーティカルストレッチャーにアウトースキッド取り付けて丸めた状態



アウトースキッドを取り付けたまま収納することができます。



収納した状態

**注意: 尖った岩やガラス破片等の鋭利なものの上で引きずることは避けてください**

改良のため、仕様は予告なく変更されることがあります。

輸入元 **FERNO**  
Japan

ファーノ・ジャパン・インク 日本支社  
 東京都千代田区岩本町1-9-5 FKビル 4F  
 TEL : 03-5820-4649  
 TEL : 03-5820-4669